

TOBII EYE TRACKER 5C



Requisitos que debe cumplir tu ordenador o tableta:

- Tamaño de la pantalla de 15" a 27"
- Compatible con Windows 10 (64 bits) RS3 o más reciente
- Intel Core de 6ª generación (i3 / i5 / i7-6xxx) y posterior, o procesador AMD de 64 bits equivalente
- Mínimo 2 GHz y puerto USB
- Memoria 8 GB RAM
- Disco Duro (HDD): 450 MB

Qué necesito para comunicarme:

- **PC o Tablet** con **Windows 10**
- Rastreador ocular **Tobii Eye Tracker 5C**

Se compra en Amazon <https://amzn.to/3r4kbNI>

- Descargar la aplicación gratuita **OptiKey** (para ratón y teclado virtual con función de lectura en voz alta)



Pasos a seguir:

1. Con el **PC o tableta con conexión a Internet**, le conectamos el **Tobii 5** y esperamos a que se **descargue solo el controlador y se abra el programa de instalación**. Puede tardar de 1 a 5 minutos, dependiendo de tu conexión a Internet. Si pasados 5 minutos, no se abre el programa de instalación, puedes descargar el software manualmente tal como indica el siguiente *paso 2*.
2. Descargamos el software de seguimiento ocular *Eye Tracker 5C* y calibramos.

Para descargar el Software de Seguimiento Ocular:

1º entrar en <https://gaming.tobii.com/getstarted/>

Software de seguimiento ocular

Seleccione el hardware a continuación que desea habilitar con seguimiento ocular.

1. Seleccione el hardware

2. Seleccione el dispositivo Tobii


Dispositivo

Dispositivo
Rastreador ocular Tobii 5
Tobii Eye Tracker 4C / Tobii EyeX

Extensiones de juego

Ayuda

3. Luego, descargamos la aplicación *Optikey* <http://www.optikey.org/> , aquí bajamos por la página y elegimos la **Descarga PRO**, que lo incluye todo, y ejecutamos.

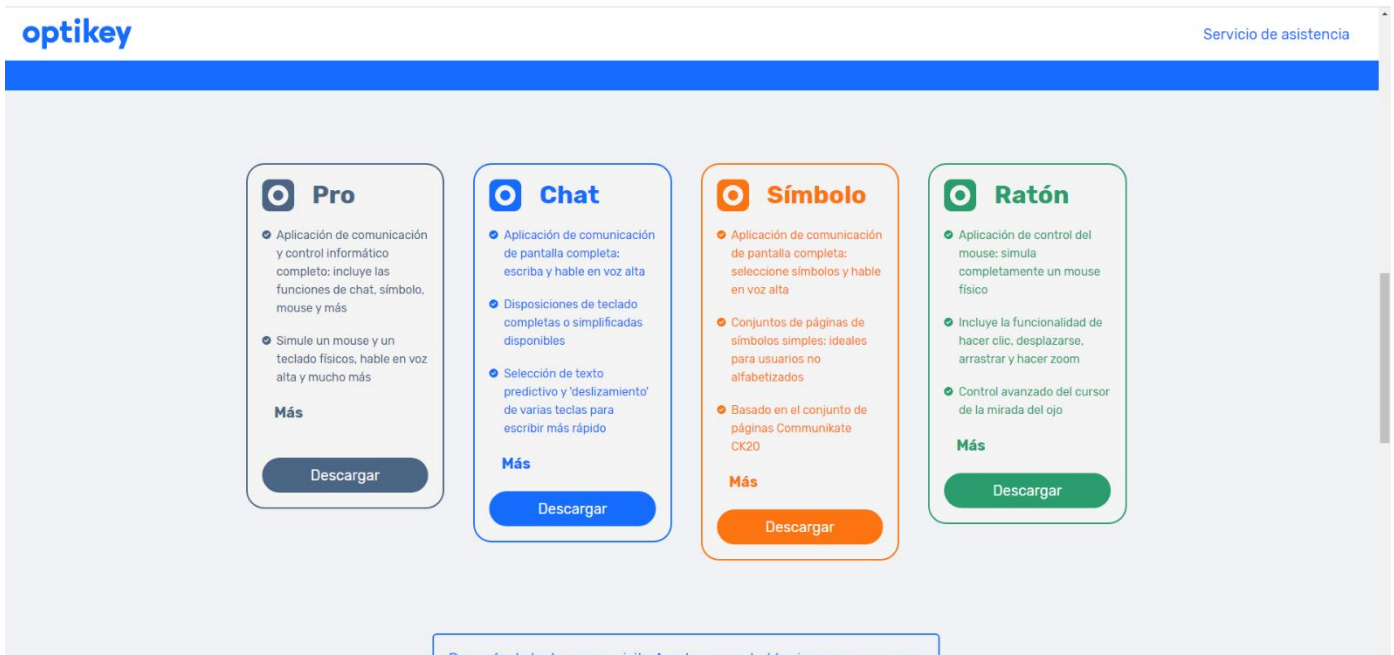

El programa *OptiKey* es personalizable y todos los cambios se pueden hacer en *Ajustes*.

Para que ***OptiKey* se abra automáticamente al arrancar Windows 10**, este es uno de los métodos más simples. Lo único que tienes que hacer es abrir el explorador de Windows y navegar a *Este Equipo > Disco Local C > ProgramData > Microsoft > Windows > Menú Inicio > Programas > Inicio*. Y en esta última carpeta pegar el icono de acceso directo de *Optikey*.

Vídeo tutorial de instalación:

Antonio Luis, usuario experto <https://www.youtube.com/watch?v=uy0NqqnNSNc>

Para instalar Tobii en un MacBook o iMac:

Los ordenadores Mac de *Apple* tienen dentro una aplicación que se llama *Boot Camp*, esa app es para instalar otro sistema operativo en una partición. Primero hay que bajar Windows 10, de la web de Microsoft (gratis) y la guardas en un pendrive. Luego, abres *Boot Camp* le asignas un tamaño a la nueva partición de disco, seleccionas la ISO de Windows que se ha descargado y le das a instalar. Es fácil, solo hay que seguir los pasos que van apareciendo y listo.

Así tendrás dos sistemas operativos y puedes arrancar el ordenador con el que quieras.

Cómo instalar Windows en un Mac fácilmente:

<https://www.youtube.com/watch?v=GxwMMo4WIiw&feature=youtu.be>

